

Aqualizer

Splint istantaneo per l'ATM



Speciale guida occlusale con le parti laterali caricate d'acqua

Vantaggi

- Fornisce rapido sollievo dai dolori muscolari
- Splintaggio d'emergenza di semplice utilizzo
- Auto regolante
- Economico, evita impronte e laboratorio, necessari per fabbricare splintaggi rigidi
- Predice il potenziale di successo o insuccesso del trattamento oclusale, prima che questo venga iniziato, aiutando ad evitare problemi e discussioni con i pazienti!
- Sono i muscoli del paziente a guidare in modo automatico, passo dopo passo, le correzioni oclusali (sui denti o su uno splint rigido).
- Bilanciamento oclusale perfetto ed istantaneo, automatico e riproducibile
- In caso di ridotta apertura della bocca rilassa i muscoli in modo da poter prendere impronte precise confortevolmente

Aqualizer si è dimostrato eccezionale per le seguenti applicazioni:

Trattamento dei sintomi ATM/PDS*

Mal di testa, dolore a collo e spalle, ecc. Alla prima visita in studio vi sarà possibile fornire un rapido sollievo dai sintomi.

Correzione oclusale

Consente di percorrere la via più diretta verso l'occlusione ottimale su splintaggi rigidi, denti naturali, protesi mobili parziali e totali, lavori di protesi fissa e riabilitazioni.


Test diagnostico differenziale

Per lo screening della PDS e di altri disturbi funzionali di tutte le aree di testa, collo e sezione superiore della schiena

*PDS: Sindrome dolorosa da disfunzione miofasciale

Riposizionamento mandibolare.

I cuscinetti dell'Aqualizer, contenenti acqua, fanno istantaneamente "galleggiare" la mandibola. Il modo in cui i denti occludono non controlla più la posizione della mandibola. Il circuito chiuso contenente fluido bilancia perfettamente le forze, in modo tale che la pressione esercitata su ogni superficie dentaria sia la stessa. I muscoli acquistano il completo controllo e non devono adattarsi all'occlusione dei denti o al meccanismo propriocettivo di rilevazione delle forze del sistema.

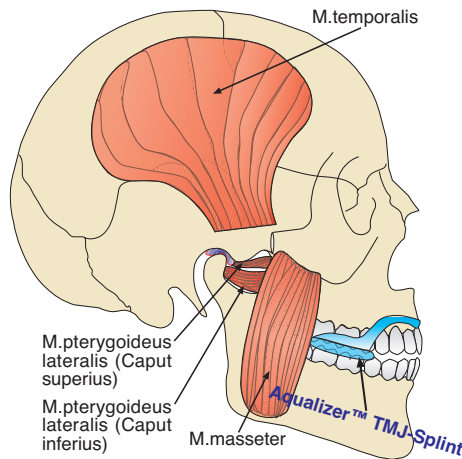

Alcuni muscoli della testa interessati dall'azione di rilassamento di Aqualizer.

I muscoli si riorganizzano in pochi secondi, spostandosi nella posizione più rilassata e confortevole.

Il sistema a fluido libera i muscoli dalla necessità di rispondere ad altre forze. Il dolore muscolare si riduce rapidamente e lo spasmo muscolare viene eliminato soltanto se la causa del problema è l'occlusione.

Fino all'80% di questi sintomi sono scatenati dall'occlusione

- MAL DI TESTA
- IPERSENSIBILITÀ ALLA LUCE
- DOLORE ALLE ORECCHIE
- SENSAZIONE DI "ORECCHIO PIENO"
- TINTINNII - RONZII
- IPERSENSIBILITÀ AI SUONI
- DOLORI AL COLLO
- DOLORI ALLE SPALLE



- 19 3701 Aqualizer bassi, 1pz
- 19 3702 Aqualizer medi, 1pz
- 19 3703 Aqualizer alti, 1pz
- ① 19,00 ③ 18,00 ⑤ 17,50
- 19 3711 Aqualizer, 10 bassi
- 19 3712 Aqualizer, 10 medi
- 19 3713 Aqualizer, 10 alti
- ① 169,00 ③ 160,50 ⑤ 155,00
- 19 3710 Aqualizer assortiti, 2 - Bassi / 6 - Medi / 2 - Alti
- ① 169,00 ③ 160,50 ⑤ 155,00

AQUALIZER ULTRA

è il nuovo modello con profilo anteriore più basso per maggior confort del paziente.



- 19 37101 Aqualizer Ultra bassi, 1pz
- 19 37102 Aqualizer Ultra medi, 1pz
- 19 37103 Aqualizer Ultra alti, 1pz
- ① 19,00 ③ 18,00 ⑤ 17,50
- 19 37111 Aqualizer Ultra, 10 bassi
- 19 37112 Aqualizer Ultra, 10 medi
- 19 37113 Aqualizer Ultra, 10 alti
- ① 169,00 ③ 160,50 ⑤ 155,00
- 19 37110 Aqualizer Ultra assortiti, 2 - Bassi / 6 - Medi / 2 - Alti
- ① 169,00 ③ 160,50 ⑤ 155,00



Pro Arch Shofu

Articolatore tipo Arcon



- Armatura leggera, in alluminio
- Elementi funzionali di alta precisione
- Distanza intercondilare 110mm
- Altezza 110mm
- Inclinazione percorso condilare sagittale 30°
- Inclinazione percorso condilare laterale 15°
- Inclinazione della tavola incisale 15°
- La branca superiore apribile fino a 120°

Molti articolatori moderni a valori medi sono del tipo Non-Arcon che, a causa della loro costruzione, consentono solo un movimento estremamente limitato.

PRO Arch I è un articolatore tipo Arcon di nuova concezione il cui uso facile e preciso simula i movimenti naturali della mandibola.

PRO Arch consente lavorazioni flessibili e versatili normalmente possibili solo con strumenti più cari e complessi.

PRO Arch I è ideale per la maggior parte dei lavori protesici ed è provvisto di un utile gamma di accessori.

Codice	Descrizione	Prezzo ①	③	⑤
19 51470	PRO Arch I Articolatore senza piastra oclusale	169,00	160,00	156,00
19 51471	PRO Arch I Articolatore con piastra oclusale	179,00	170,00	165,00
19 54472	Piastre di montaggio, in metallo	18,50	17,60	17,00
19 54473	Asta incisale	25,90	24,60	24,00
19 54474	Tavola incisale	13,50	12,85	12,00
19 54475	Piastra oclusale	17,90	17,00	16,00
19 54476	Placca di montaggio superiore	16,00	15,20	14,00
19 54477	Placca di montaggio inferiore	16,00	15,20	14,00
19 54479	Tavola incisale 0°	11,50	10,90	10,00
19 54480	Tavola incisale 5°	11,50	10,90	10,00
19 54481	Tavola incisale 10°	11,50	10,90	10,00
19 54482	Tavola incisale 15°	11,50	10,90	10,00
19 54483	Vite per tavola incisale	14,40	13,70	13,00
19 54484	Piastra di montaggio Splitcast (sottile), 2pz.	25,90	24,60	23,00
19 54485	Piastra di montaggio Splitcast (spessa), 2pz.	25,90	24,60	23,00
19 54486	Magnete per Splitcast, 2pz.	18,70	17,75	17,00
19 54487	Piastra metallica Splitcast, 10pz.	25,90	24,60	23,00

Easy Transfer

Arco Facciale Kiefer



Il primo con piano bipupillare frontale e linea mediana

Arco facciale ideato per un trasferimento rapido e agevole. Il montaggio clinico può essere eseguito con le olive auricolari oppure a livello del punto centrale dei condili e della glabella. La precisione è favorita dall'astina per il punto orbitale.

- Centraggio dell'articolazione automatico ed eseguibile con una sola mano. Movimento di apertura dell'arco facciale bloccabile
- Applicabile su tutti gli articolatori
- Indicatore bipupillare e della linea mediana, (opzionale) per fornire informazioni al laboratorio
- Trasferimento in articolatore con l'adattatore splitcast. Splitcast e contro-splitcast possono essere archiviati

19 3250 Easy Transfer con forchetta e splitcast
① 515,00 ③ 489,00 ⑤ 476,00

19 3251 Indicatore linea bipupillare in due pezzi
① 98,00 ③ 93,00 ⑤ 90,00

19 3253 Transfer WK Light, splitcast e magneti
① 119,00 ③ 113,00 ⑤ 110,00

WK Light Kiefer

Articolatore Arcon



Moderno ed economico, ultraleggero, rigido e resistente

Modello base (valori medi)

- Inserti di retrusione e protrusione intercambiabili, disponibili col piano ad incrementi di 0,5 mm
- Finestra condilare intercambiabile, da 0°, 12°, 18°
- È possibile lavorare con l'articolatore posto sul banco ad un angolo che facilita la visuale
- Stabile in ogni posizione, inclusa l'apertura della branca superiore
- Può essere bloccato in centrica per il movimento cerniera
- Il sistema split cast è incorporato
- Utilizzabile con tutti gli archi facciali

Modello Individuale

- Inclinazione condilare
- Movimento di Bennett progressivo
- Movimento di Bennett immediato bilaterale, 2 mm per lato
- Altezza verticale, 28 mm

Sono disponibili tutti i ricambi e accessori non illustrati



Articolatore Arcon WK Light a valore medio	
19 31201	WK Light val. medio, blu
19 31202	WK Light val. medio, nero
19 31203	WK Light val. medio, verde
19 31204	WK Light val. medio, rosso
①	295,00
19 31205	WK Light val. medio, in alluminio
①	390,00
Articolatore Arcon WK Light a valore individuale	
19 31206	WK Light val. individuale, blu
19 31207	WK Light val. individuale, nero
19 31208	WK Light val. individuale, verde
19 31209	WK Light val. individuale, rosso
①	590,00
19 31210	WK Light val. individ., in alluminio
①	685,00

Dénar Mark II

Articolatore semi-regolabile



- Semi regolabile
- Regolazioni: angolo di protrusiva 0-60°
movimento laterale immediato 0-4mm
movimento laterale progressivo 5-15°
- Caratteristiche fisse:
inclinazione parete posteriore 25°
pareti superiori piatte;
distanza intercondilare 110mm
- Cerniera di centrica con blocco preciso
- Molle ritentive per trattenere le branche superiore e inferiore senza bloccaggio in centrica. Sganciabili quando non usate.
- Fosse intercambiabili con Anamark Plus
- Modello Arcon
- Può essere calibrato - verificato - con il "Field Inspection Gage" per consentire ai modelli di essere usati in altri articolatori calibrati

Con l'articolatore Mark II è possibile montare accuratamente i modelli su uno strumento programmato meccanicamente per simulare i movimenti mandibolari.

Contattateci per quotazioni su altri modelli, accessori e ricambi Déнар

19 913101 Déнар Mark II Plus/flat
① 1100,00

19 913601 Déнар D5A
Articolatore a valori individuali
1 - Tavola incisale regolabile
1 - Tavola incisale steep
1 - Perno di centrica
12 - Piastre di montaggio
1 - Chiavetta
1 - Scatola trasporto
① 2275,00

Dénar Slidematic

Arco facciale



- Meccanismo a cerniera "speed glide" consente l'apertura orizzontale per adattarsi a diverse ampiezze del viso. Rende la misurazione rapida e facile
- Le braccia dell'arco sono collegate per un movimento preciso di equidistanza dalla linea mediana
- Indicatore di riferimento per allinearsi ad un piano orizzontale
- Distanza intercondilare misurata direttamente dall'arco
- Jig di trasferimento facilmente distaccabile
- Viti fissabili manualmente
- Per tutti gli articolatori Déнар
- Indici accessori per usare il Jig sugli articolatori SAM, Whip-Mix, Dentatus e Panadent
- Facilità di montaggio dei modelli. Quando la forchetta viene collegata all'indice di articolazione, il modello mascellare può essere montato facilmente in articolatore. Non è necessario un supporto per i modelli
- Il punto di riferimento per determinare la posizione dell'asse cerniera arbitrario è il meato acustico esterno

Slidematic si distingue per le caratteristiche uniche: facilità d'uso, velocità, accuratezza ed economicità. Il disegno consente di risparmiare tempo eliminando la necessità di assemblare l'intero arco facciale sull'articolatore. Dopo la misurazione, il solo transfer jig viene montato sull'articolatore, liberando l'arco facciale per l'uso su altri pazienti.

19 923112 Déнар arco facciale Slidematic 1 jig
① 430,00
19 923091 Déнар Complete Transfer Jig
① 205,00
19 923029 Déнар forchetta bite
19 923030 Déнар forchetta bite edentuli
① 39,00 ③ 37,00 ⑤ 36,00

Dénar Piastre Montaggio

Veloci, intercambiabili



Piastre in plastica con inserto metallico



Piastre Magnetiche

Piastre in plastica con inserto metallico

- Le piastre di montaggio Déнар trattengono saldamente in sede i modelli. L'inserto metallico riduce al minimo le alterazioni alla filettatura facilitando l'uso delle piastre. Adatte per articolatori Déнар e Hanau.

Piastre Magnetiche

- Piastra magnetica di precisione e sistema di conversione per garantire la rapida rimozione e l'accurato riposizionamento dei modelli montati
- **Ripetibilità** la piastra s'incassa in sede per un allineamento preciso e ripetibile
- **Flessibile** sistema di conversione per articolatori di facile installazione ma rimovibile per i casi che richiedono un sistema di montaggio tradizionale a vite
- **Forte** l'aumentata forza del magnete trattiene con sicurezza il modello montato in sede
- **Rapido** il disco metallico, sagomato direttamente nella piastra di montaggio monouso, consente il montaggio dei modelli in un solo rapido passaggio e l'altrettanto rapida rimozione. Ciò significa risparmio di tempo e denaro.

19 9432601 Déнар Piastre montaggio in plastica, "disposable" con inserto metallico, 10pz.
① 32,00 ③ 30,40 ⑤ 29,60

19 94326100 Déнар Piastre montaggio in plastica, "disposable" con inserto metallico, 100pz.
① 145,00 ③ 138,00 ⑤ 134,00

19 9432368 Déнар Piastre montaggio in plastica con inserto metallico e magnete, 20pz.
① 58,50 ③ 55,60 ⑤ 54,00

19 9432369 Déнар Piastre montaggio in plastica con inserto metallico e magnete, 100pz.
① 219,00 ③ 208,00 ⑤ 202,00

Bausch - Carte, Seta e Pellicole di articolazione

Descrizione	Bianco	Blu	Rosso	Blu	Nero	Nero	Verde	Incolore
				Rosso	Rosso			
Carta 200 µm - Colorazione progressiva per il controllo iniziale. Pressione leggera = Colorazione chiara / Pressione forte = Colorazione più scura. Dopo aver eliminato le interferenze evidenziate con questa carta da 200 micron si passa a tipi più sottili (es. Arti-Fol da 8 micron).								
Bausch, 200 µm - 300 - Strisce diritte (BK01 / BK02)		19 95701	19 95702					
① 9,40 ③ 9,10 ⑤ 8,85								
Bausch, 200 µm - 50 fogli a ferro di cavallo (BK03 / BK04)		19 95703	19 95704					
① 7,80 ③ 7,55 ⑤ 7,30								
Seta 80µm - Seta da articolazione a colorazione progressiva. Economica perché utilizzabile fino a 10 volte. Stessi usi della carta da 200 micron.								
Bausch seta 80µm - largh. 70mm, lung. 3m (BK07 / BK06)		19 95707	19 95706					
Bausch seta 80µm - largh. 16 mm, lung. 10m (BK08)								
① 16,90 ③ 16,00 ⑤ 15,70								
Carta 60µm - Carta ultrasottile disponibile anche a forma di ferro di cavallo per il controllo generale dell'occlusione. Particolarmente adatta per i pazienti con tendenza a chiudere su un solo lato, per le protesi totali in occlusione bilaterale bilanciata e per la marcatura delle placche occlusali.								
Bausch 60µ Ferro di cavallo - 150 Fogli (BK17 / 18)		19 95717	19 95718					
① 16,20 ③ 15,40 ⑤ 15,05								
Bausch 60µ Ferro di cavallo - 100 Fogli (BK81)				19 95781				
① 16,20 ③ 15,40 ⑤ 15,05								
Bausch 60µ - 100 Strisce (BK80)				19 95780				
① 8,90 ③ 8,65 ⑤ 8,45								
Bausch 40µm Carta ultrasottile per l'aggiustamento occlusale finale di corone, ponti e intarsi. Per i restauri in ceramica è consigliabile la carta rossa, il cui pigmento brucia senza lasciare alcun residuo nelle cotture di correzione.								
Bausch 40µ - 200 - Strisce diritte (BK09 / BK10)		19 95709	19 95710					
① 7,35 ③ 7,10 ⑤ 6,90								
Bausch 40µ - 100 Fogli 10x7cm (BK11 / BK12)		19 95711	19 95712					
① 19,80 ③ 18,65 ⑤ 18,15								
Bausch 40µ Rotolo 15m (BK13 / BK14)		19 95713	19 95714					
① 8,50 ③ 8,00 ⑤ 7,85								
Arti Fol Metallic 12µm - Materiale Hi-Tech costituito da una pellicola di poliestere metallizzato con uno strato ultrasottile di colorante che si trasferisce in modo ottimale anche sulla ceramica e sul metallo lucidato a specchio. Utilizzabile a mano libera. Estremamente resistente allo strappo, idoneo per il controllo dell'elasticità. Rispetto al tradizionale Shimstock marca esattamente il punto di contatto. Ottimo anche per il controllo dei contatti prossimali.								
Arti-Fol Metallic, 15 m, 1 lato rivestito, alt. 75mm (BK731)			19 957731					
① 27,50 ③ 26,15 ⑤ 25,40								
Arti-Fol Metallic, dispenser 20m 1 lato rivestito, alt. 22mm		19 95733	19 95731		19 95730	19 95732		
① 11,80 ③ 11,20 ⑤ 10,90								
Arti-Fol Metallic, dispenser 20 m 1 lato rivestito, alt. 8mm			19 95735					19 95738
Rosso: ① 8,80 ③ 8,35 ⑤ 8,15 Non rivestito: ① 6,80 ③ 6,45 ⑤ 6,15								
Arti-Fol Metallic, dispenser 20 m non rivestito, alt. 16mm								19 95739
① 10,30 ③ 9,80 ⑤ 9,50								
Arti Fol 8µm - Film plastico in strisce ultrasottili che consentono di individuare la più piccola interferenza occlusale. Utilizzabile in campo umido. Ottima resistenza allo strappo ed elasticità: si evidenziano bene i più piccoli contatti anche su ceramica e superfici lucidate a specchio. La pellicola bianca è ideale per il controllo occlusale sulle superfici in cera scura (blu, grigia, verde, rossa, ecc.).								
Arti Fol 8µm Dispenser 20m, altezza 22mm, 1 lato	19 95729	19 95723	19 95721			19 95720	19 95722	
① 7,90 ③ 7,65 ⑤ 7,40 Bianco (BK29): ① 11,80 ③ 11,20 ⑤ 10,90								
Arti Fol 8µm Dispenser 20m, altezza 22mm, 2 lati		19 95727	19 95725		19 95728	19 95724	19 95726	
① 10,50 ③ 10,15 ⑤ 9,90								
Arti Fol 8µm - Pellicola ultrasottile in fogli larghi 75mm, per il controllo in lab. di arcate intere, particolarmente di protesi totali e guide occlusali. Per facilitare il lavoro consigliamo l'uso con le pinze a ferro di cavallo.								
Arti Fol 8µm Dispenser 20m, altezza 75mm, 1 lato	19 95779	19 95773	19 95771			19 95770	19 95772	
① 17,15 ③ 16,80 ⑤ 16,40								
Arti Fol 8µm Dispenser 15m, altezza 75mm, 2 lati		19 95777	19 95775			19 95774	19 95776	
① 22,00 ③ 21,40 ⑤ 20,90								
Arti Tec 19µm - Pellicola per laboratorio che non si arrotola in presenza di cariche elettrostatiche. Ideale per tutti i controlli routinari del laboratorio.								
Arti-Tec, dispenser 20 metri 1 lato rivestito altezza 22mm		19 95743	19 95741					
① 7,00 ③ 6,70 ⑤ 6,45								
Arti-Tec, rotolo 15 metri 1 lato rivestito altezza 75mm		19 95747	19 95745					
① 11,00 ③ 10,60 ⑤ 10,40								

**Strumentario per Articolazione e Misurazioni
(Spessimetri , Calibri, ecc.)
al capitolo Stumentario**

ESEMPIO D'USO DELLE PELLICOLE COLORATE:

- Nero: Contatti centrici
- Verde: Escursioni laterali
- Rosso: Escursioni laterali
- Bianco: Cera
- Blu: Uso generale

Articodent Union Broach

Carta extra sensibile



Carta per articolazione extra sensibile, studiata per marcare chiaramente le superfici. Articodent è confezionata in dispenser ergonomico di semplice impiego. Tipo microsottile ideato dal Dr. D.H. Zillner.

Rotoli Articodent con dispenser
19 35004 Media, blu, 76µm, 750cm

19 35001 Xsottile blu, 50, 8µm, 750cm
19 35002 Sottile blu, 63,5µm, 750cm
19 35003 Sottile rosso, 63,5µm, 750cm
① 16,90 ③ 16,00 ⑤ 15,60

Hi Mark

Carta microsottile



La classica carta per articolazione microfina per l'equilibratura oclusale di precisione. La base di cera idrofila fornisce marcature chiare e ben definite su cuspidi e superfici oclusali. Spessore 38micron

19 95301 Hi Mark Rossa
19 95302 Hi Mark Blu
4 - Blocchetti da 60 fogli (2,5x10,1 cm)
① 28,70 ③ 27,25 ⑤ 26,50

Artus Hi Tech Foil

Shimstock ultrasottile originale



AccuFilm I e II

Carta per micro-correzioni oclusali



Carta da 21micron per micro-correzioni oclusali. Morbida, precisa e priva di memoria. Segna solo i reali contatti prematuri. Non rialza l'occlusione, non si sfalda nè si stira, neppure in ambiente umido. Conf. da 280 strisce (90x22 mm).

AccuFilm I rivestita su 1 lato
19 75014 Nero 19 75015 Rosso
19 75016 Verde
① 14,95 ③ 14,20 ⑤ 13,80

AccuFilm II rivestita su 2 lati
19 75017 Rosso/nero 19 75021 Rosso/rosso
19 75018 Nero/nero
① 19,40 ③ 18,40 ⑤ 17,95

Arti Spray Bausch

Spray rivelatore di precontatti



- Controllo dei contatti oclusali e della precisione di ponti e corone
- Strato di colore sottilissimo, facilmente eliminabile con acqua, senza residui.

I componenti di Arti-Spray sono innocui.

19 957285 Arti-Spray 1 bianco
19 957286 Arti-Spray 2 rosso
19 957287 Arti-Spray 3 blu
19 957288 Arti-Spray 4 verde
1 - Flacone spray da 75ml
① 15,40 ③ 14,65 ⑤ 14,20

Striscia metallica Hi-tech ultrasottile per il controllo finale dell'occlusione.

La striscia viene inserita tra i denti del lato controlaterale a quello del restauro da verificare. Se esce agevolmente, il restauro presenta ancora precontatti. Il contatto ideale è infatti un "contatto piuma". Usata in modo analogo serve per evidenziare i precontatti bilanciati.

19 95310 Artus
250 - Strisce metalliche pretagliate
① 69,50 ③ 67,00 ⑤ 64,00

HiSpot Talladium



Rivelatore di precontatti



Hi Spot è una miscela a rapida essiccazione che dopo l'applicazione produce una polvere indicatrice microfina.

Hi Spot Talladium può essere applicato su metalli, ceramiche, gessi e cere. Hi Spot si sciacqua facilmente dal moncone e non lo macchia.

Può essere applicato direttamente nelle cappette o nelle corone per verificarne l'adattamento, sulle superfici oclusali antagoniste per gli aggiustamenti oclusali, sulle aree basali degli elementi intermedi in ceramica per regolare il contatto e sulle superfici prossimali per verificare l'entità dei contatti prossimali.

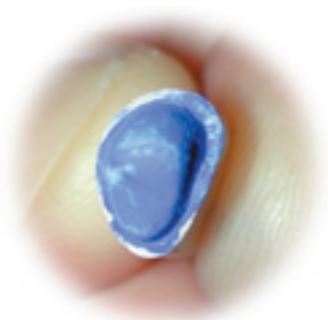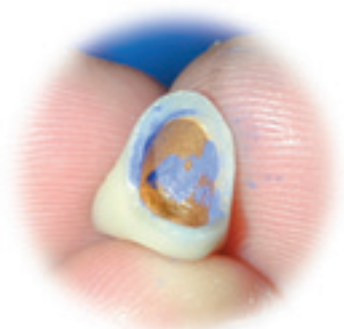

19 95110 Hi-Spot blu
19 95120 Hi-Spot giallo
19 95130 Hi-Spot rosso
1 - Flacone da 15ml
① 18,50 ③ 17,60 ⑤ 17,00

19 95140 Diluente per Hi-Spot
1 - Flacone da 15ml
① 6,00 ③ 5,70 ⑤ 5,50



HiSite UPI

Rivelatore di precontatti

- Applicazione facile, sottile e uniforme
- Asciuga rapidamente
- Facilmente rimovibile

Facile e preciso



Consigliatelo anche ai vostri tecnici!

HiSite è ideale per identificare contatti occlusali o interprossimali stretti, per visualizzare interferenze tra i perni e le loro preparazioni e prematurità delle superfici coronali interne (NON per la ceramica integrale, molto porosa internamente).

Utile anche per scoprire precontatti delle protesi parziali rimovibili a livello di attacchi, ganci, ecc.

Brevetti USA n. 4.997.371 e 5.269.684
Brevetti Internaz. Concessi e "Pending"

19 15680 Hi-Site Kit
2 - Siringhe precaricate da 1,2ml
20 - Punte a pennello Inspiral
① 36,90 ③ 35,06 ⑤ 34,13

19 15681 Hi-Site Ricambio
2 - Siringhe da 1,2ml
① 22,04 ③ 20,94 ⑤ 20,39



Dopo aver agitato la siringa in modo da distribuire perfettamente i pigmenti Hi Site viene applicato dove desiderato con la punta a pennello Inspiral



L'area di contatto prossimale viene facilmente rivestita e asciugata con l'aria




La ricostruzione viene inserita in bocca, o sul modello, per verificare interferenze e/o precontatti



Il contatto prossimale viene aggiustato alla giusta dimensione e posizione.




Protesi con attacchi rivestita con HiSite su tutte le aree da valutare in relazione ai contatti e asciugata con aria

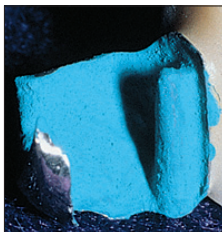

(a sinistra) Superficie interna dell'attacco fuso coperta con uno strato sottile e uniforme di HiSite



(a destra) Dopo la prova il metallo scoperto viene scaricato leggermente. L'intera operazione viene ripetuta fino al miglioramento dell'inserimento della protesi.

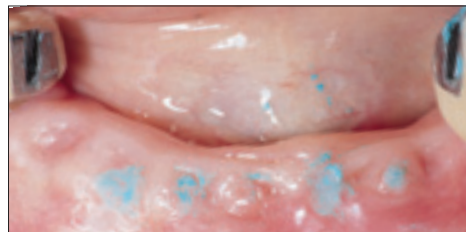

HiSite viene trasferito ad aree d'interferenza adiacenti asciutte e non rivestite indicando contatti da pressione.


Fleximeter-Strips

Calibri di preparazione



- Calibri di tre diversi spessori per la misurazione delle altezze durante la preparazione protesica di corone o ponti
- Ideali per la valutazione degli spazi in laboratorio e per la preparazione dei provvisori preprotetici

Fleximeter-Strips sono prodotti con uno speciale caucciù al silicone, sterilizzabile fino a 200°C.

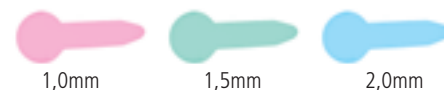

19 95250 Fleximeter 1,0mm rosa, 15pz
19 95251 Fleximeter 1,5mm verde, 15pz
19 95252 Fleximeter 2,0mm blu, 15pz
19 95253 Fleximeter assortite, 15pz
① 16,00 ③ 15,20 ⑤ 14,80

Legenda Prezzi - Sconto per Quantitativi

In questo catalogo la maggior parte dei prodotti ha tre categorie di prezzo così contrassegnate:

- ① Prezzo per l'acquisto di 1 pezzo o di 1 confezione
- ③ Prezzo unitario per l'acquisto minimo di 3 pezzi o di 3 confezioni (3 o 4)
- ⑤ Prezzo unitario per l'acquisto minimo di 5 pezzi o di 5 confezioni (da 5 in poi)

In alcuni casi particolari il prezzo sarà

- ⑥ Prezzo unitario per l'acquisto minimo di 6 pezzi o di 6 confezioni (da 6 al livello successivo)
- ⑩ Prezzo unitario per l'acquisto minimo di 10 pezzi o di 10 confezioni (da 10 in poi)

Per alcune apparecchiature e per determinati prodotti viene indicato un solo prezzo. In questo caso non sono previsti sconti per quantitativi.